


Overview & Quick Reference Guide



A1CNow® Self Check Test System

Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

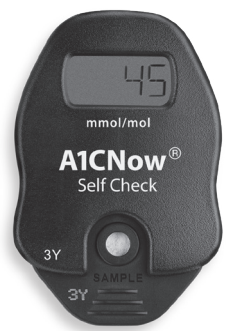


+1-317-870-5610

We invite you to call us and we will guide you through the test.

IMPORTANT!

- FIRST**, we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video on our website at ptsdiagnostics.com. **THEN**, follow all steps as you perform the test.
- Do not open pouches** until instructed.
- Make sure lot number on analyzer matches lot numbers on pouches.
- Use indoors between 18°C - 25°C / 64°F - 77°F and out of direct sunlight.
- Do not use if product is past the expiration date.
- If the kit has recently been kept at temperatures outside the recommended conditions, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.

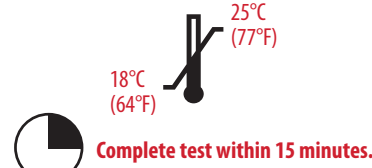


Complete test within 15 minutes.

6 Open Foil Cartridge Pouch* AFTER Blood Collection

- Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.
- Tear foil pouch open at the notches on the sides.

Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening. If foil pouch is damaged, do not use.

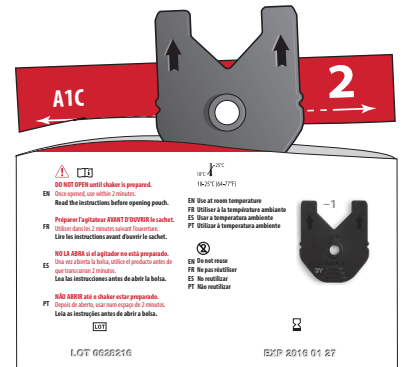


- DO NOT adjust your medication unless instructed to do so by your doctor or healthcare provider.**
- If you have any questions about your A1C result, please contact your doctor or healthcare provider.

Caution: This device contains material of animal origin and should be handled as a potential carrier and transmitter of disease.


For additional information, see the reverse side of this insert.

If you are not able to access the instructional video on our website, we encourage you to call customer service at +1-317-870-5610 to walk you through the test.

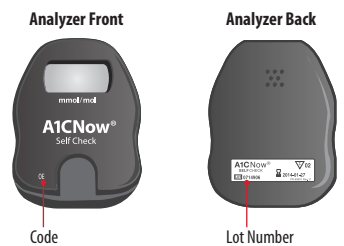

Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00TL."

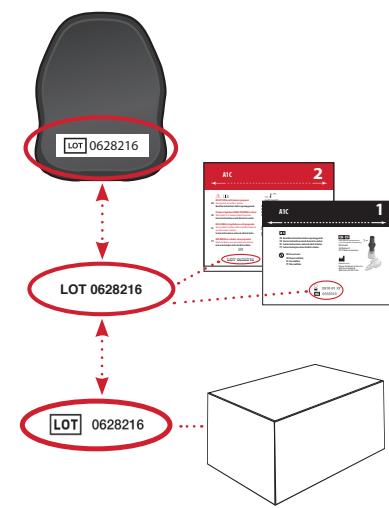


7 Insert Cartridge

- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at +1-317-870-5610.**




8 Prepare Shaker

Remove shaker base.

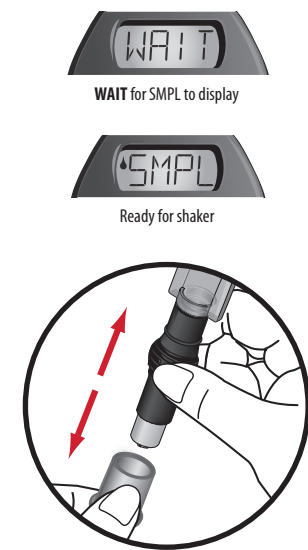

1 Open Plastic Shaker Pouch*

Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

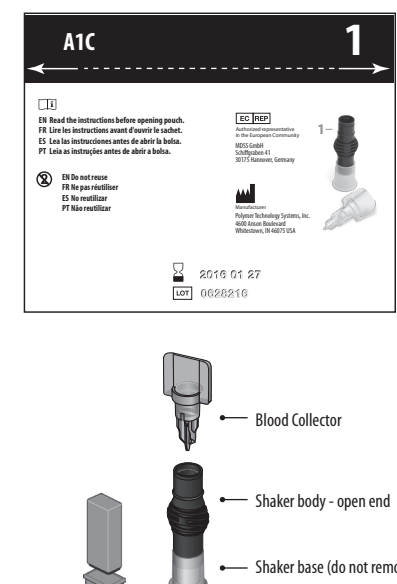

9 Dispense Sample into Cartridge


- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.
- Remove sampler from cartridge quickly.
- "RUN" will appear.



Do not handle analyzer again until test is complete!

2 Prick Finger


- Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.
- Remove cap and press lancet into finger.
- Gently squeeze finger to get adequate blood.

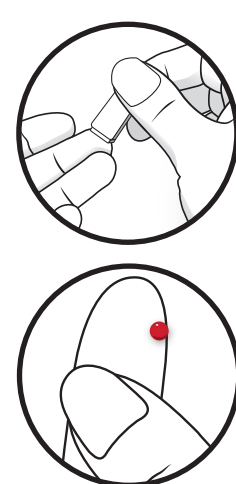

Actual size required

3 Collect Blood

- Gently touch blood collector to top of blood drop to fill.
- Make sure collector is adequately filled.

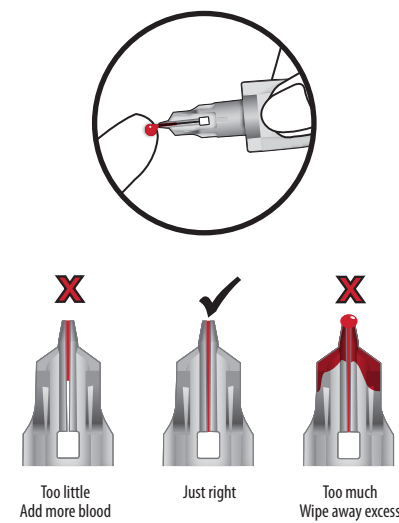

Too little Add more blood Just right Too much Wipe away excess

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer


- Dispose of cartridge in your household waste.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01TL" if there is one test left and "00TL" if you just used your last test.
- Record your A1C result in the result log in Step 12.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new shaker, blood collector, test cartridge, and lancet from the same kit and return to Step 1.

4 Insert Blood Collector


- Fully insert blood collector into shaker body.
- Push hard while twisting to fully insert.

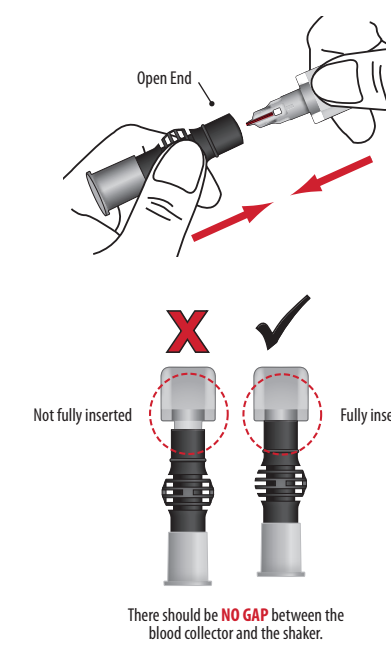

There should be **NO GAP** between the blood collector and the shaker.

5 Mix

- Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds). This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.

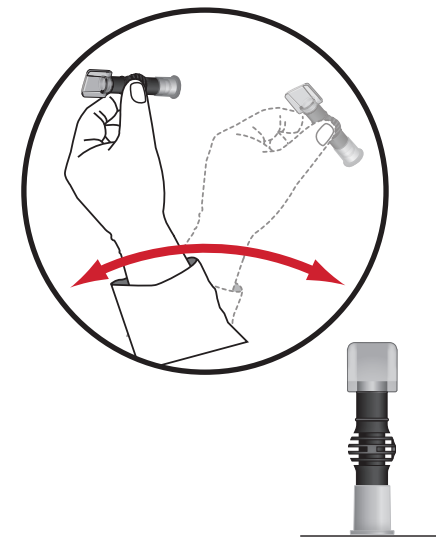

Result Interpretation

- Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.**
- When this device is used for monitoring of an existing disease, adapt the treatment **only** if you have received the appropriate training to do so.

12 Log Result

Chart your progress here.

Record your A1C results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your A1C goal in the space provided.

Date:
A1C Result:
A1C Goal:


Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

* Pouch illustrations may vary.

Översikt och snabbpreferensguide

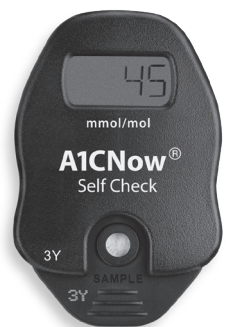


A1CNow® Self Check Testsystem

Observera! Bilderna av lådan eller påsarna i den här bipacksedeln är ENDAST avsedda som exempel. Se förpackningen som medföljde ditt kit.

VIKTIGT!

- FÖRST** rekommenderar vi att du läser alla anvisningar noga och tittar på den korta instruktionsvideon på vår webbplats ptsdiagnostics.com. **SEDAN** följer du alla steg när du utför testet.
- Öppna inte** påsen innan du instrueras att göra det.
- Kontrollera att lotnumret på analysatorn matchar lotnumren på påsarna.
- Använd inomhus mellan 18 °C och 25 °C (64 °F till 77 °F) och skyddat från direkt solljus.
- Använd inte om produkten har passerat utgångsdatumet.
- Om kitet nyligen har förvarats vid temperaturer utanför rekommenderade förhållanden, ställ kitet i rumstemperatur minst en timme innan du använder det.

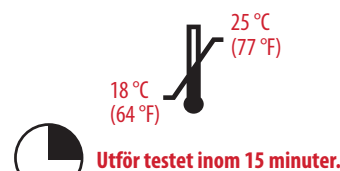


Utför testet inom 15 minuter.

6 Öppna kassettsens foliepåse* EFTER blodinsamlingen

- Sätt in kassetten omedelbart i analysatorn och använd den inom 2 minuter.
- Öppna foliepåsen vid skärorna på sidorna.

Var försiktig! Öppna INTE foliepåsen före det här steget. Använd inom 2 minuter efter öppnande. Använd inte foliepåsen om den är skadad.

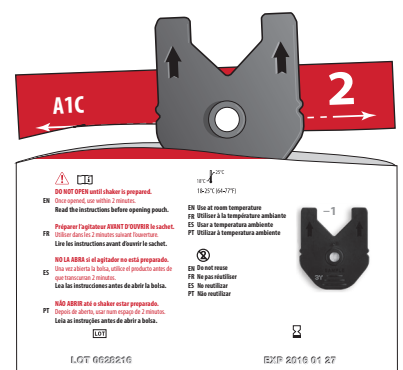


- Justera **INTE** din medicinerings såvida du inte instrueras att göra så av din läkare eller vårdgivare.
- Om du har några frågor rörande dina A1C-resultat kontakta din läkare eller vårdgivare.

Var försiktig! Enheten innehåller material av animaliskt ursprung och ska hanteras som potentiell bärare och spridare av smitta.


Mer information finns på baksidan av den här bipacksedeln.

Om du inte kan se videon på vår webbplats rekommenderar vi att du ringer kundtjänst på +1-317-870-5610 så att de kan guida dig genom testet.

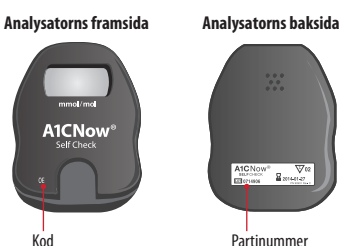

Matcha lotnummer

Använd endast analysatorn med de material som medföljer det ursprungliga kitet. Analysatorn utgår när det programmerade antalet tester har utförts. Om en annan testkassett sätts in visar analysatorn "00TL."

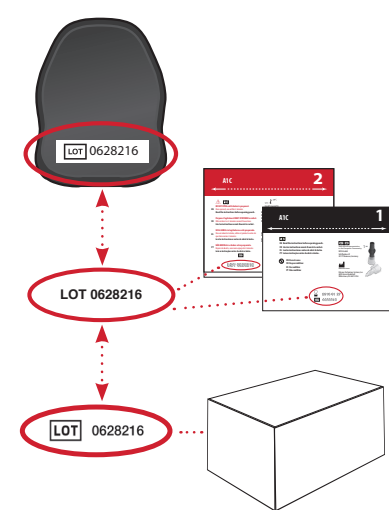

7 För in kassett

- "Klicka" fast testkassetten.
- Analysatorns och testkassetts koder måste matcha.
- Om koderna inte överensstämmer, ring kundtjänst på +1-317-870-5610.**




8 Förbered skakaren

Ta bort skakarens bas.



1 Öppna skakarens plastpåse*

Öppna INTE kassettsens foliepåse före steg 6.

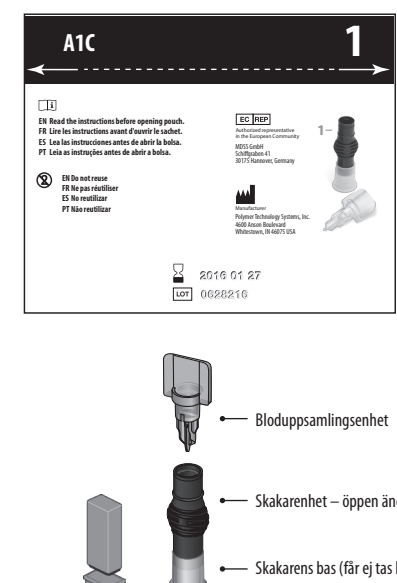

9 Dispensera provet i kassetten


- Kontrollera att analysatorn står på en plan yta.
- Tryck ned helt för att dispensera det spädda provet och ta sedan bort den med en kontinuerlig rörelse.
- Ta snabbt bort provtagaren från kassetten.
- "RUN" (kör) syns.



Rör inte analysatorn igen förrän testet är slutfört!

2 Fingerstick


- Tvätta händerna eller rengör med sprit och torka innan testet utförs.
- Ta bort locket och tryck in lansetten i fingret.
- Kläm försiktigt på fingret för att få tillräckligt med blod.

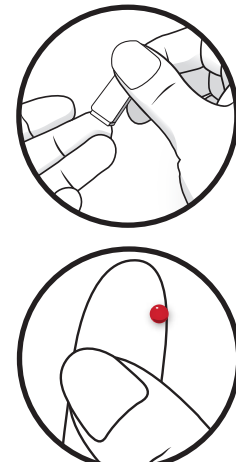

Mängd blod som behövs

3 Samla upp blod

- För försiktigt blodsamlaren mot bloddroppens topp för att fylla den.
- Kontrollera att uppsamlaren är tillräckligt fylld.

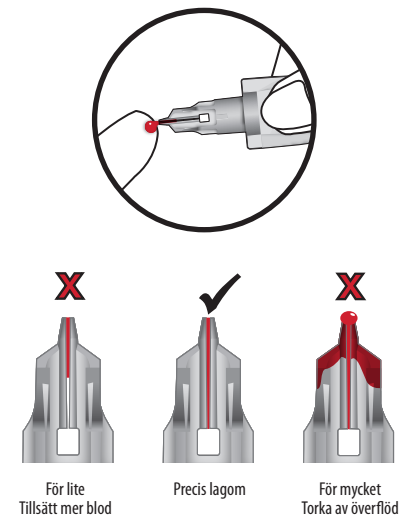

För lite Tillsätt mer blod Precis lagom För mycket Torka av överflöd

11 Kassera kassett/spara analysator


- Kasta kassetten i hushållsavfallet.
- Spara analysatorn för ytterligare tester. Analysatorn visar till exempel "01TL" om det bara finns ett test kvar och "00TL" om du precis har använt det sista testet.
- Registrera A1C-resultatet i resultatloggen i steg 12.
- Analysatorn visar resultat i 15 minuter och stängs sedan av automatiskt.



OBSERVERA! För att köra ytterligare test använder du en ny skakare, blodsamlare, testkassett och lansett från samma kit och återgår till steg 1.

4 För in bloduppsamlingsenheten


- Skjut in blodsamlaren helt i skakaren.
- Tryck hårt samtidigt som du vrider så att delarna kopplar fast i varandra ordentligt.

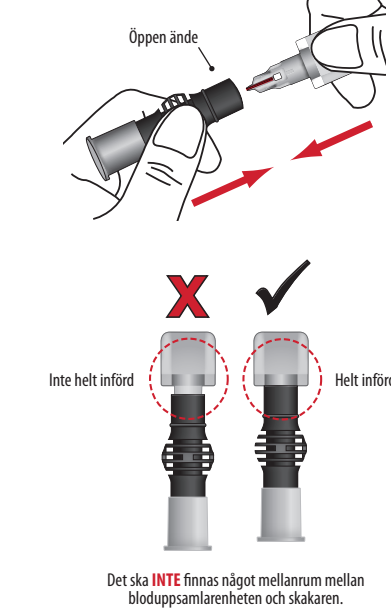

Det ska **INTE** finnas något mellanrum mellan bloduppsamlarenheten och skakaren.

5 Blanda

- Skaka kraftigt 6–8 gånger (ungefär 5 sekunder). Detta blandar blodet med lösningen.
- Ställ skakaren på bordet samtidigt som du förbereder kassetten.

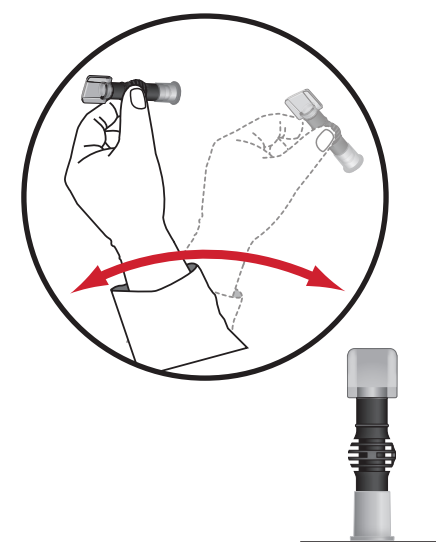

12 Logga resultat

Kartlägg processen här.

Registrera dina A1C-resultat här och ta med dig denna vid läkarbesök. Skriv ned dina A1C-mål i det avsedda utrymmet.

Datum:
A1C-resultat:
A1C-mål:

Datum:
A1C-resultat:
A1C-mål:

Datum:
A1C-resultat:
A1C-mål:

Datum:
A1C-resultat:
A1C-mål:

* Illustrationerna av påsen kan variera.

