



USER INSTRUCTIONS

Health o meter® Professional 894KLT

Health o meter® Professional 895KLT

Cautions and Warnings

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale with anything on the platform.
- For accurate weighing, the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before use.
- Do not use in the presence of flammable materials.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications


This Talking Digital Floor Scale announces the weight measurement in English or Spanish. It also features a weight hold that allows the weight measurement to stay displayed for 20 seconds after stepping off scale. Each precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and provides features that make the weighing process simple, fast and convenient. This scale is set up to determine the weight of a stationary patient. Weight is displayed in pounds or kilograms (kg).

Capacity and Resolution	894KLT Capacity: 400 lb / 180 kg; 895KLT Capacity: 550 lb / 250 kg; 894KLT/895KLT Resolution: 0.2 lb / 0.1 kg	
Environmental	Operating temperatures: 5°C to 40°C (41°F to 104°F); Storage temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 125°F) Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa; Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage	
Physical Dimensions	Platform Size: Width: 13 3/4" (349 mm) Depth: 10 3/4" (273 mm) Height: 1 1/2" (38 mm)	Product Footprint: Width: 14 1/4" (362 mm) Depth: 11 7/8" (302 mm) Height: 1 1/2" (38 mm) Weight: 4 lb (1.8 kg)

Inserting the Batteries / Replacing the Batteries

The scale is shipped without the batteries installed. The batteries are included in a small plastic bag. Follow these instructions to insert the batteries on a new scale or to replace depleted batteries on your current scale. The battery compartment is located on the underside of the scale.

1. To open the battery compartment cover, push the battery compartment tab to the right and lift upwards.

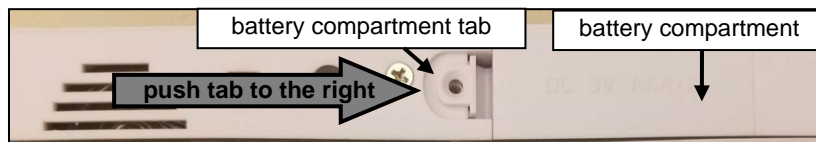

2. Install two new AAA batteries. Health o meter® Professional recommends using an alkaline battery rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc carbon batteries. Follow the battery illustration to ensure the batteries are inserted in the proper direction.




3. To attach the battery compartment cover, slide the end of the cover into the battery compartment. Then push down on the tab and compartment to ensure the battery cover is firmly attached. You do NOT need the screw to close the battery compartment. You may use the screw to further secure the battery compartment if desired. Do not use the scale without the battery compartment cover attached.



To Set Weight Mode (KG or LB)

Slide the switch to the desired weight mode.

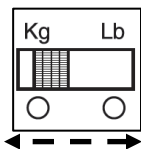


To Change the Language or Mute

Push the language mode button. The display will show which language is selected. Select the mute symbol for no sound.


EN = English
ES = Spanish
🔇 = No Sound

To Start


To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform.

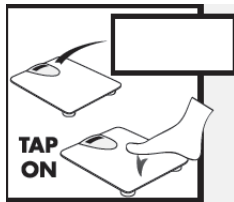

Four digits will appear on the display.

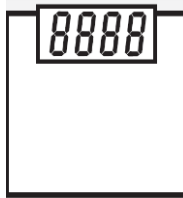


Wait for 0.0 to appear on the display.

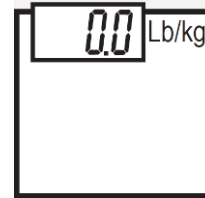

To Weigh


When ready, the scale will direct patient to step onto the scale. Stand still until weight appears.

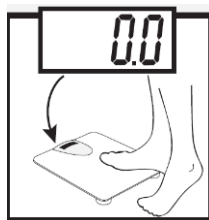

The measurement will flash on the display and scale will announce the weight.




Weight will remain displayed for 20 seconds after stepping off the scale.

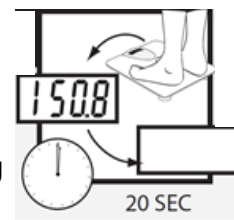


Troubleshooting

If the display shows "Lo bAtt" message, replace batteries per the included instructions.

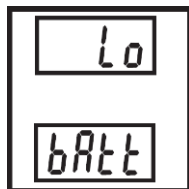

If the display shows "Err E" the load on the scale exceeds the capacity.
894KLT Capacity: 400 lb / 180 kg
895KLT Capacity: 550 lb / 250 kg

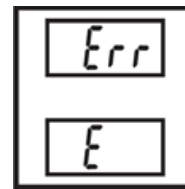

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter[®] Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or disposable wipe:
 - mild soap and water solution
 - 70% isopropyl alcohol
 - solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
2. After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure the screen and scale parts are completely dry after cleaning.
3. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale's finish.
4. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
5. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

1-Year Limited Warranty

This Health o meter[®] Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

For information or support, please contact Customer Service at 1 (800) 815-6615 or HomProCS@homscales.com

For complete warranty terms or the full user manual visit www.homscales.com

Health o meter[®] is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.

Health o meter[®] Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC.

We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter[®] Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2020



INSTRUCCIONES DEL USUARIO

Health o meter® Professional 894KLT

Health o meter® Professional 895KLT

Precauciones y Advertencias

Para prevenir lesiones y daño a su báscula, por favor siga estas instrucciones muy cuidadosamente.

- No transporte la báscula con objeto alguno sobre la plataforma.
- Para pesajes exactos, se debe colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Para pesajes exactos, verifique antes de cada uso el funcionamiento apropiado según el procedimiento descrito en este manual.
- No se utilice en presencia de materiales inflamables.

En ningún caso Pelstar, LLC será responsable por daños o lesiones causados por, o en relación a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

Especificaciones


Esta Báscula Digital de Piso con Función de Voz anuncia la medida del peso en Inglés o Español. También ofrece un bloqueo del peso que permite que la medición permanezca mostrada por 20 segundos luego de bajar de la báscula. Cada báscula de precisión se diseña para proporcionar mediciones de peso exactas, confiables y repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente estacionario. El peso se exhibe en libras o kilogramos (kg).

Capacidad y Resolución	894KLT Capacidad: 400 lb / 180 kg; 895KLT Capacidad: 550 lb / 250 kg 894KLT/895KLT Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg	
Entorno	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperaturas de Almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión Atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad Máxima: 85% de HR en uso o almacenada	
Dimensiones Físicas	Tamaño de la Plataforma: Ancho: 13 3/4" (349 mm) Largo: 10 3/4" (273 mm) Altura: 1 1/2" (38 mm)	Espacio Ocupado: Ancho: 14 1/4" (362 mm) Largo: 11 7/8" (302 mm) Altura: 1 1/2" (38 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Inserción de las baterías / Reemplazo de las baterías

La báscula se envía sin las baterías instaladas. Las pilas están incluidas en una pequeña bolsa de plástico. Siga estas instrucciones para insertar las baterías en una nueva báscula o para reemplazar las baterías agotadas en su báscula actual. El compartimiento de baterías está situado en la parte de abajo de la báscula.

1. Para abrir la cubierta de las baterías, empuje la pestaña del compartimiento hacia la derecha y tire hacia arriba.

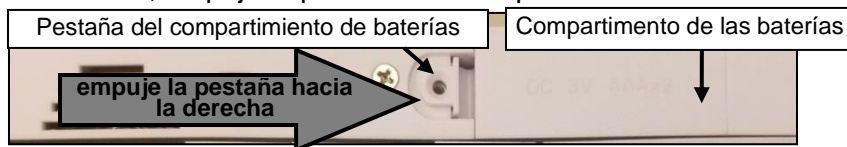

2. Reemplace o instale dos nuevas baterías AAA. Health o meter® Professional recomienda usar baterías alcalinas con especificación para operar a 130°F (54°C). No utilice baterías de zinc-carbón. Siga la ilustración para asegurarse de que las baterías estén insertadas en la dirección adecuada.




3. Para colocar la tapa del compartimiento de la batería, deslice el extremo de la tapa en el compartimiento de la batería. Luego presione la pestaña en el compartimiento para asegurar la posición de la cubierta. Usted NO necesita ningún tornillo para cerrar el compartimiento de las baterías. Puede usar el tornillo para asegurar aún más el compartimiento de la batería si lo desea. No utilice la báscula sin la tapa del compartimiento de la batería colocada.



Para Cambiar el Modo de Peso (KG or LB)

Deslice el interruptor hacia el modo de peso deseado.

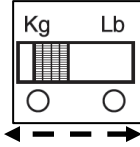

Para Cambiar el Idioma o Silenciar

Presione el botón para cambiar el modo. La pantalla mostrará qué idioma está seleccionado. Seleccione el símbolo de silencio para que no haya sonido.


EN = Inglés

ES = Español


= Sin Sonido

Activar


Para encender la báscula, golpee firmemente con su pie en el centro de la plataforma.

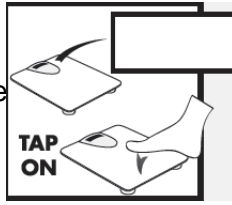

Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla.

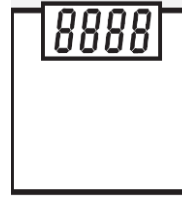


Espere hasta que 0.0 aparezca en la pantalla.

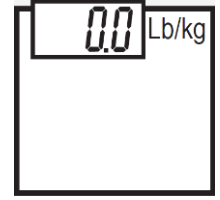

Para Pesar

Cuando es lista, la báscula indicará al paciente subir a la misma.


Permanezca quieto hasta que aparezca el peso.

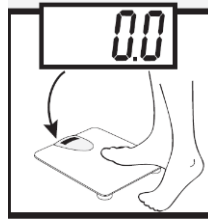

Después de que el peso se haya fijado, la medición destellará en la pantalla y la báscula anunciará el peso.




El peso seguirá mostrado por 20 segundos luego de bajar de la báscula.

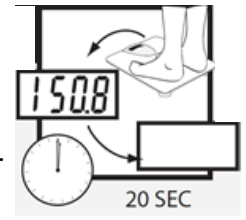


Solución de Problemas

Si la pantalla muestra el mensaje "Lo bAtt", reemplace las baterías de acuerdo con las instrucciones anteriores.

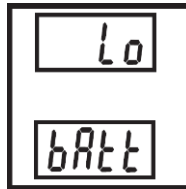

Si la pantalla muestra "Err E", la carga sobre la báscula excede la capacidad.

Capacidad del Modelo 894KLT: 400 lb / 180 kg
Capacidad del Modelo 895KLT: 550 lb / 250 kg

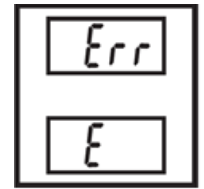

Limpieza y Desinfección

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones en un paño suave o toallita desechable.

- solución suave de jabón y agua
 - alcohol isopropílico al 70%
 - solución de peróxido de hidrógeno, concentración 1-5%
2. Después de la limpieza/desinfección, pase un paño humedecido con agua y luego un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies mojadas, asegúrese de que la pantalla y los componentes de la báscula están completamente secos luego de la limpieza.
3. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que éstos arruinan el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua o en ningún otro líquido.
5. No vierta ni atomice líquidos directamente sobre la báscula.

Garantía Limitada de 1 Año

Este producto Health o meter® Professional está garantizado desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea la sección "Obtener Servicio de Garantía", abajo, para obtener instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sólo por el periodo de garantía original.

Para obtener información o soporte, comuníquese con Servicio al Cliente al 1 (800) 815-6615 o HomProCS@homscscales.com

Para ver los términos completos de la garantía o el manual completo del usuario, visite www.homscscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados, y de propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar, realzar, o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2020